

## NOTICE D'INSTRUCTION - GANT DE BOITE A GANT EN POLYURETHANE (PUR) 6/10mm MONTE SUR BAGUE SUPPORT

### ➤ Domaine application/ Caractéristiques du matériau et péremption

- Ce gant peut être utilisé dans les industries nucléaires, les industries pharmaceutiques et les industries diverses
- Ce gant est fabriqué en polyuréthane
- Ce gant protège contre certains risques mécaniques, contre la contamination radioactive.
- Il peut être utilisé dans une atmosphère contenant de l'ozone. Ce gant ne protège pas contre les rayonnements ionisant
- Aucune protection contre les risques chimiques n'est revendiquée
- Le délai de péremption de ce gant dans son emballage d'origine et stocké dans les conditions décrites ci-dessous est de 4 ans

### ➤ Législation, Analyse de risque et préconisations d'utilisation


- Ce gant est conforme au règlement 2016/425.
- Il est rappelé, selon la Directive (UE) 2019/1832, la nécessité de réaliser une analyse des risques liés au port du gant (rupture d'étanchéité par ex.)
- Avant chaque utilisation, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler la qualité et l'intégrité du gant. En cas de doute, il est conseillé de mettre les gants au rebut
- Pour le montage et le démontage des gants sur les boîtes à gants, suivre les consignes établies par le responsable sécurité et le fabricant de rond de gant
- Lors d'une contamination, suivre les consignes établies par le responsable sécurité
- Les gants doivent être utilisés à température ambiante. Pour une utilisation dans d'autres conditions de température, contacter le fabricant
- Les gants seront portés sur des mains sèches et propres, les ongles courts. Les bijoux sont à éviter
- Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement
- Ce gant ne peut être monté que si le client dispose d'un système J2L permettant de recevoir le gant (Système non validé par IFTH lors de l'examen CE de type)

### ➤ Composants :

- Ce gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation

### ➤ Propriétés du gant

- **Résistance Mécanique EN 388+A1 (2018)**

Tests	Niveau	Pictogramme
Abrasion	4 sur 4	 4122X
Coupure par tranchage	1 sur 5	
Déchirure	2 sur 4	
Perforation	2 sur 4	
Coupe Tests selon l'EN ISO 13997 :1999	X	
X : essai non réalisé		

- **Dextérité, Intégrité et fissuration à l'ozone**

Tests	Niveau
Dextérité <b>EN420+ A1 : 2009</b>	5 sur 5
Intégrité (pression 30 mbar) <b>EN421-2010</b>	Conforme
Résistance fissuration à l'ozone <b>EN421-2010</b>	4 sur 4

La classe la plus élevée correspond au niveau de performance le plus élevé



## NOTICE D'INSTRUCTION - GANT DE BOITE A GANT EN POLYURETHANE (PUR) 6/10mm MONTE SUR BAGUE SUPPORT

### ➤ Marquage

- Exemple de marquage porté sur le gant et l'emballage (voir ci-dessous)

LOGO PIERCAN


PIERCAN (1)

CE 0333 (2) 57800 PUR 10 E6 GJABS [XXXXX]

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FR XXXXXX LOT : XX XX (10)

EXPIRY : XX/XX/XX (11)

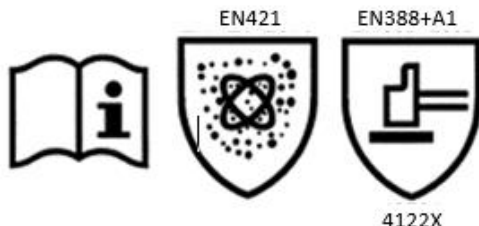

(12)

(13)

(14)

N°	DESCRIPTIF
1	Fabricant – Responsable de la mise sur le marché
2	Marquage "CE" et N° de l'organisme en charge du contrôle annuel
3	Forme
4	Longueur en mm
5	Matière
6	Taille
7	Epaisseur en 10ème de mm
8	Gant monté sur bague
9	Code Article produit
10	Numéro d'affaire et numéro de lot « FR » fabrication française « US » fabrication américaine
11	Date expiration au stockage
12	Pictogramme « INFORMATION »
13	Pictogramme « Protection contre la contamination radioactive » EN 421-2010
14	Pictogramme « Protection contre les risques mécaniques » EN 388+A1 (2018)

### ➤ Taille disponible dans le principal modèle ambidextre

FORME	Ø RDG (diamètre du rond de gant)	Ø BS (diamètre intérieur de la bague support)	TAILLE					
			7.5	8.5	9	9.5	10	10.5
64 (GJABS)	136	131					x	

### ➤ Emballage approprié pour le transport

- Les gants doivent être transportés dans leur emballage d'origine.

### ➤ Stockage

- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- Température de stockage : 5 à 25°C.
- Pas de stockage à proximité d'installations électriques pour éviter le vieillissement accéléré

### ➤ Nettoyage/décontamination et entretien

- Si nécessaire, les gants sont lavés à l'eau savonneuse, rincés à l'eau claire, séchés dans un courant d'air à basse température (<40°C) et talqués. Les performances ne sont pas garanties par l'IFTH après lavage
- Ne pas utiliser de produits chimiques.
- Si l'utilisation de produits chimiques est nécessaire, contacter le fabricant pour plus de renseignements
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants tels que des brosses métalliques, du papier de verres ou des objets similaires

### ➤ Traitement du gant

- Gants non recyclable
- Il peut être éliminé comme un simple déchet non toxique s'il est non souillé par un produit dangereux
- En cas de gant souillé, éliminer le gant dans la filière adaptée

## INSTRUCTIONS - GLOVEBOX GLOVES MADE OF POLYURETHANE (PUR) 6/10mm MOUNTED ON SUPPORT RING

➤ **Scope/Characteristics of the material and expiry**

- This glove can be used in nuclear industries, pharmaceutical industries and miscellaneous industries.
- This glove is manufactured using polyurethane
- This glove protects against certain mechanical risks and against radioactive contamination.
- It can be used in an atmosphere containing ozone. This glove does not protect against ionising radiation.
- No protection against chemical risks is claimed.
- The shelf life of this glove in its original packaging stored under the conditions described below is 4 years.

➤ **Legislation, Risk analysis and recommendations for use**


- This glove complies with regulation 2016/425
- Please note, according to the regulation (UE) 2019/1832, the necessity to carry out a risk analysis relating to wearing the glove (e.g. breaking of tightness)
- Before each use, it is the responsibility of the user to check the quality and the integrity of the glove. In case of any doubt, it is recommended to discard the gloves
- For the assembly and disassembly of the gloves on the gloveboxes, please follow the instructions drafted by the safety manager and the glove port manufacturer.
- In case of a contamination, follow the instructions drafted by the safety manager.
- The gloves should be used at ambient temperature. Please contact the manufacturer for use under other temperature conditions.
- The gloves must be worn on clean and dry hands, with the nails cut short. Avoid wearing jewellery.
- It is recommended to not wear gloves when there is a risk of being caught by moving machine parts.
- This glove can only be mounted if the client has a J2L system that allows receiving the glove (System not validated by IFTH during the EC type examination)

➤ **Components:**

- This glove does not contain substances in proportions in which they are known or suspected to have harmful effects on the user's health or hygiene under the foreseeable conditions of use.

➤ **Properties of the glove**

- **Mechanical Strength EN388+A1 (2018)**

Tests	Level	Pictogram
Abrasion	4 of 4	 4122X
Cut by slicing	1 of 5	
Tear	2 of 4	
Perforation	2 of 4	
Tests Section as per EN ISO 13997 :1999	x	
X: test not carried out		

- Precision, Integrity and ozone cracking

Tests	Level
Precision <b>EN420+ A1:2009</b>	5 of 5
Integrity (pressure 30 mbar) <b>EN421-2010</b>	Compliant
Ozone cracking resistance <b>EN421-2010</b>	4 of 4

The highest class corresponds to the highest performance level

# INSTRUCTIONS - GLOVEBOX GLOVES MADE OF POLYURETHANE (PUR) 6/10mm MOUNTED ON SUPPORT RING

➤ **Marking**

- Example of marking put on the glove and the packaging (see below)

**PIERCAN LOGO**

**PIERCAN (1)**




**0333 (2) 57800 PUR 10 E6 GJABS [XXXXXX]**

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

**FR XXXXXX BATCH:XX XX (10)**

**EXPIRY : XX/XX/XX (11)**

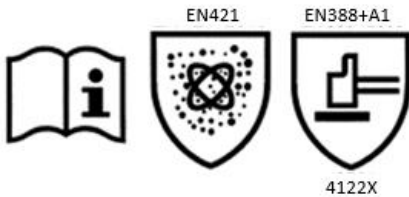

(12)

(13)

(14)

No.	DESCRIPTION
1	Manufacturer – In charge of release to the market
2	“CE” marking and No. of the body in charge of the annual inspection
3	Form
4	Length in mm
5	Material
6	Size
7	Thickness in 10th of mm
8	Glove mounted on ring
9	Product Item Code
10	Case number and batch number (“FR” French manufacturing “US” American manufacturing)
11	Date of expiry in storage
12	“INFORMATION” pictogram
13	“Protection against radioactive contamination” pictogram EN 421-2010
14	“Protection against mechanical risks” pictogram EN 388+A1 (2018)

➤ **Size available in the main ambidextrous model**

FORM	Ø RDG (glove port diameter)	Ø BS (internal diameter of the support ring)	SIZE					
			7.5	8.5	9	9.5	10	10.5
64 (GJABS)	136	131					x	

➤ **Suitable packaging for transport**

- The gloves should be transported in their original packaging.

➤ **Storage**

- Store in a dry place, away from light
- Storage temperature: 5 to 25°C.
- Do not store near electrical installations to avoid accelerated ageing

➤ **Cleaning/decontamination and maintenance**

- If necessary, the gloves are washed with soapy water, rinsed with clear water, and dried under a low temperature air flow (<40°C) and powdered. The performance is not guaranteed by the IFTH after washing
- Do not use chemical products
- If it is necessary to use chemical products, please contact the manufacturer for more information.
- Do not use pointed or sharp objects like wire brushes, sandpaper or similar objects

➤ **Treatment of the glove**

- Non-recyclable gloves
- It can be discarded as simple non-toxic waste if it is not soiled by a hazardous product
- If a glove is soiled, discard it through the appropriate channel

# MERKBLATT - HANDSCHUH AUS POLYURETHAN (PUR) 6/10mm MIT MONTIERTEM RING FÜR HANDSCHUHBOX

## ➤ Anwendungsbereich/ Materialeigenschaften und Haltbarkeit

- Dieser Handschuh kann in der Nuklearindustrie, in der Pharmaindustrie und in anderen Industrien verwendet werden.
- Dieser Handschuh ist aus Polyurethan hergestellt.
- Dieser Handschuh schützt vor bestimmten mechanischen Risiken und vor radioaktiver Kontamination.
- Er kann in einer ozonhaltigen Atmosphäre verwendet werden. Dieser Handschuh schützt nicht vor ionisierender Strahlung.
- Es wird kein Schutz vor chemischen Risiken geltend gemacht
- Die Haltbarkeit dieses Handschuhs in der Originalverpackung und bei Lagerung unter den unten beschriebenen Bedingungen beträgt 4 Jahre.

## ➤ Gesetzgebung, Risikoanalyse und Empfehlungen für die Verwendung


- Dieser Handschuh entspricht der Verordnung 2016/425.
- Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1832 muss eine Analyse der mit dem Tragen des Handschuhs verbundenen Risiken (z. B. Leckage) durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Qualität und Unversehrtheit des Handschuhs vor jedem Gebrauch zu überprüfen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Handschuhe zu entsorgen
- Bei der Montage und Demontage von Handschuhen an Handschuhboxen sind die Anweisungen des Sicherheitsbeauftragten und des Handschuhringherstellers zu befolgen.
- Im Falle einer Kontamination sind die Anweisungen des Sicherheitsbeauftragten zu befolgen.
- Die Handschuhe müssen bei Raumtemperatur verwendet werden. Für den Einsatz unter anderen Temperaturbedingungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Die Handschuhe sollten an trockenen, sauberen Händen mit kurzen Fingernägeln getragen werden. Das Tragen von Schmuck ist zu vermeiden.
- Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Maschinenteilen erfasst werden.
- Dieser Handschuh kann nur montiert werden, wenn der Kunde über ein J2L-System verfügt, das die Montage des Handschuhs ermöglicht (System wurde von der IFTH bei der EU-Baumusterprüfung nicht validiert).

## ➤ Bestandteile:

- Dieser Handschuh enthält keine Stoffe in Mengen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen nachteilige Auswirkungen auf die Hygiene oder die Gesundheit des Benutzers haben.

## ➤ Eigenschaften

- **Mechanische Festigkeit EN 388+A1 (2018)**

Tests	Stufe	Piktogramm
Abriebfestigkeit	4 von 4	 4122X
Fallschnittfestigkeit	1 von 5	
Weiterreißfestigkeit	2 von 4	
Durchstichfestigkeit	2 von 4	
Coupe-Tests nach EN ISO 13997:1999	X	
X: Test nicht durchgeführt		

- **Fingerfertigkeit, Integrität und Ozonrissbildung**

Tests	Stufe
Fingerfertigkeit <b>EN420+ A1: 2009</b>	5 von 5
Integrität (Druck 30 mbar) <b>EN421-2010</b>	Konform
Widerstand gegen Ozonrisse <b>EN421-2010</b>	4 von 4

Die höchste Klasse entspricht dem höchsten Leistungsniveau




## MERKBLATT - HANDSCHUH AUS POLYURETHAN 6/10mm MIT MONTIERTEM RING FÜR HANDSCHUHBOX


### ➤ Kennzeichnung

- Beispiel für die Kennzeichnung auf dem Handschuh und der Verpackung (siehe unten)

LOGO PIERCAN

PIERCAN (1)


**0333** (2) **57800 PUR 10 E6 GJABS [XXXXX]**  
 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
**FR XXXXXX LOT: XX XX** (10)  
**EXPIRY: XX/XX/XXXX** (11)

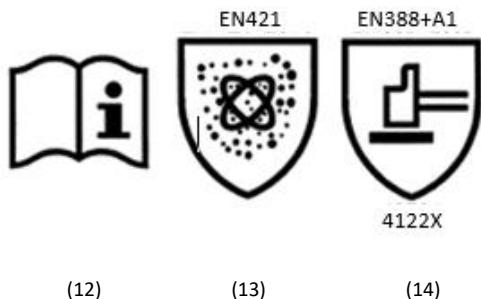

Nr.	BESCHREIBUNG
1	Hersteller – Inverkehrbringer
2	CE-Kennzeichnung und Nummer der mit der jährlichen Kontrolle beauftragten Stelle
3	Form
4	Länge in mm
5	Material
6	Größe
7	Stärke in 10tel mm
8	Handschuh auf Ring montiert
9	Artikelcode des Produkts
10	Auftragsnummer und Chargennummer („FR“ französische Herstellung „US“ amerikanische Herstellung)
11	Verfallsdatum der Lagerung
12	Piktogramm „INFORMATION“
13	Piktogramm „Schutz gegen radioaktive Belastung“ EN 421-2010
14	Piktogramm „Schutz gegen mechanische Risiken“ EN 388+A1 (2018)

### ➤ Verfügbare Größe in der wichtigsten beidhändigen Ausführung

FORM	Ø RDG (Durchmesser des Handschuhlings )	Ø BS (Innendurchmesser des Rings)	GRÖSSE					
			7.5	8.5	9	9.5	10	10.5
64 (GJABS)	136	131					x	

### ➤ Transportgerechte Verpackung

- Die Handschuhe müssen in ihrer Originalverpackung transportiert werden.

### ➤ Lagerung

- Trocken und vor Licht geschützt lagern
- Lagertemperatur: 5 bis 25°C.
- Keine Lagerung in der Nähe von elektrischen Anlagen, um eine beschleunigte Alterung zu vermeiden

### ➤ Reinigung/Dekontamination und Pflege

- Falls erforderlich, werden die Handschuhe mit Seifenwasser gewaschen, mit klarem Wasser abgespült, im Luftstrom bei niedriger Temperatur (<40°C) getrocknet und mit Talkum behandelt. Die IFTH übernimmt keine Garantie für die Leistung nach dem Waschen
- Keine Chemikalien verwenden.
- Wenn der Einsatz von Chemikalien erforderlich ist, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.
- Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände wie Drahtbürsten, Schleifpapier oder ähnliches

### ➤ Entsorgung des Handschuhs

- Handschuh nicht recycelbar
- Der Handschuh kann als einfacher ungiftiger Abfall entsorgt werden, wenn er nicht durch einen gefährlichen Stoff kontaminiert ist.
- Im Fall eines kontaminierten Handschuhs entsorgen Sie ihn in der entsprechenden Abfallentsorgungseinrichtung.

EU-Baumusterprüfbescheinigungen (TEC) ausgestellt von (delivered by): I.F.T.H. (Nr. 0072) Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY Cedex.  
Prüfstelle (Monitoring organization): AFNOR CERTIFICATION (Nr. 0333) :11, rue Francis Pressensé-93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex

PIERCAN: Impasse des Macareux ZI Huppain /F 14520 PORT EN BESSIN Tel :33 ( 0)2 31 21 73 80 Fax:33 ( 0) 2 31 21 40 23 E-Mail: piercan @ piercan.fr Website: www. Piercan.fr  
Merkblatt: Ausgabe vom 30/03/2022 Rev 1

## FOLLETO DE INSTRUCCIONES - GUANTE PARA CAJA DE GUANTES DE POLIURETANO (PUR) 6/10 mm MONTADO EN ANILLO DE SOPORTE

### ➤ Sectores de aplicación / Características del material y caducidad

- Este guante puede utilizarse en industrias nucleares, industrias farmacéuticas e industrias varias.
- Este guante está hecho de poliuretano.
- Este guante protege de algunos riesgos mecánicos y de la contaminación radiactiva.
- Puede utilizarse en una atmósfera que contenga ozono. Este guante no protege de la radiación ionizante.
- No se reivindica ninguna protección contra los riesgos químicos.
- La caducidad de este guante figura en su embalaje original y, si se guarda en las condiciones descritas a continuación, es de 4 años.

### ➤ Legislación, análisis de riesgos y recomendaciones de uso

- Este guante está conforme con el reglamento 2016/425.
- Se recuerda, según la Directiva (UE) 2019/1832, la necesidad de realizar un análisis de riesgos relativos al uso del guante (por ejemplo, fin de estanqueidad).
- Antes de cada uso, es responsabilidad del usuario controlar la calidad y la integridad del guante. En caso de duda, se recomienda desechar los guantes.
- Para el montaje y desmontaje de los guantes en cajas de guantes, seguir las instrucciones definidas por el responsable de seguridad y el fabricante de puertos de guante.
- En caso de contaminación, seguir las instrucciones establecidas por el responsable de la seguridad.
- Los guantes deberán utilizarse a temperatura ambiente. Para un uso en otras condiciones de temperatura, contactar con el fabricante.
- Los guantes se utilizarán en manos secas y limpias, con las uñas cortas. Se evitará el uso de joyas.
- El uso de los guantes no está recomendado cuando existe el riesgo de que queden atrapados con piezas de máquinas en movimiento.
- Este guante solo puede montarse si el cliente dispone de un sistema J2L que permita recibir el guante (sistema no validado por el IFTH durante el examen CE de tipo).

### ➤ Componentes:

- Este guante no contiene sustancias que presenten unos índices conocidos o sospechosos de tener efectos adversos sobre la higiene o la salud del usuario en las condiciones previsibles de uso.

### ➤ Propiedades del guante

- **Resistencia mecánica EN 388+A1 (2018)**

Tests	Nivel	Pictograma
Abrasión	4 de 4	 4122X
Corte por cuchilla	1 de 5	
Rasgado	2 de 4	
Perforación	2 de 4	
Corte Tests según EN ISO 13997 :1999	X	
X: ensayo no realizado		

- **Dexteridad, integridad y agrietamiento por ozono**

Tests	Nivel
Dexteridad EN 420+ A1 : 2009	5 de 5
Integridad (presión 30 mbar) EN 421-2010	Conforme
Resistencia al agrietamiento por OZONO EN 421-2010	4 de 4

La clase más alta corresponde con el nivel de prestaciones más elevado




## FOLLETO DE INSTRUCCIONES - GUANTE PARA CAJA DE GUANTES DE POLIURETANO (PUR) 6/10 mm MONTADO EN ANILLO DE SOPORTE


### ➤ Marcado

- Ejemplo de marcado indicado en el guante y en el embalaje (ver a continuación)

LOGO PIERCAN

PIERCAN (1)


**0333** (2) **57800 PUR 10 E6 GJABS [XXXXX]**  
 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
**FR XXXXXX LOT : XX XX** (10)  
**EXPIRY : XX/XX/XX** (11)

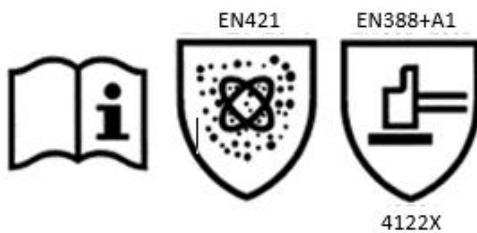

(12)

(13)

(14)

N°	DESCRIPCIÓN
1	Fabricante – Responsable de la comercialización
2	Marcado «CE» y N.º del organismo encargado del control anual
3	Forma
4	Longitud en mm
5	Material
6	Talla
7	Grosor en 1/10 mm
8	Guante montado en anillo
9	Código Artículo producto
10	Número de asunto y número de lote («FR» fabricación francesa «US» fabricación americana)
11	Fecha de caducidad en almacenamiento
12	Pictograma «INFORMACIÓN»
13	Pictograma «Protección contra la contaminación radiactiva» EN 421-2010
14	Pictograma «Protección contra los riesgos mecánicos» EN 388+A1 (2018)

### ➤ Talla disponible en el principal modelo ambidiestro

FORMA	Ø RDG (diámetro del puerto de guante)	Ø BS (diámetro interior del anillo de soporte)	TALLAS					
			7.5	8.5	9	9.5	10	10.5
64 (GJABS)	136	131					x	

### ➤ Embalaje apto

- Los guantes deberán transportarse en su embalaje original.

para el transporte

### ➤ Almacenamiento

- Almacenamiento en un lugar seco protegido de la luz.
- Temperatura de almacenamiento: de 5 a 25 °C.
- No almacenar cerca de instalaciones eléctricas para evitar el envejecimiento acelerado.

### ➤ Limpeza/descontaminación y mantenimiento

- Si es necesario, los guantes se lavarán con agua y jabón, se aclararán con agua limpia, se secarán en una corriente de aire a baja temperatura (<40 °C) y se entalcarán. Las prestaciones no estarán garantizadas por el IFTH después del lavado.
- No utilizar productos químicos.
- Si es necesario utilizar productos químicos, contactar con el fabricante para más información.
- No utilizar objetos puntiagudos o cortantes como cepillos metálicos, papel de lija u objetos similares.

### ➤ Tratamiento del guante

- Guante no reciclable.
- Puede eliminarse como un residuo normal no tóxico si no ha sido contaminado por un producto peligroso.
- En caso de que el guante esté contaminado, eliminarlo en la red que corresponda.



## ISTRUZIONI PER L'USO - GUANTO PER SCATOLA A GUANTI (GLOVE BOX) IN POLIURETANO (PUR) 6/10 mm MONTATO SU GHIERA DI SUPPORTO

### ➤ Ambito d'applicazione / Caratteristiche del materiale e scadenza

- Questo guanto può essere utilizzato nell'industria nucleare, nell'industria farmaceutica e in diversi settori industriali.
- Questo guanto è prodotto in poliuretano
- Questo guanto protegge da alcuni rischi meccanici e dalla contaminazione radioattiva.
- Può essere utilizzato in atmosfera contenente ozono. Questo guanto non protegge dalle radiazioni ionizzanti
- Non è rivendicata alcuna protezione dai rischi chimici
- La scadenza di questo guanto, se conservato nell'imballaggio d'origine e alle condizioni descritte di seguito, è di 4 anni

### ➤ Legislazione, analisi dei rischi e raccomandazioni d'uso


- Questo guanto è conforme al regolamento 2016/425.
- Si rammenta ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1832, la necessità di realizzare un'analisi dei rischi legata all'utilizzo di questo guanto (rottura dell'impermeabilità, ad esempio)
- Prima di ogni utilizzo, è responsabilità dell'utilizzatore verificare la qualità e l'integrità del guanto. In caso di dubbi, si consiglia di smaltire adeguatamente i guanti
- Per il fissaggio e lo smontaggio dei guanti sulle scatole a guanti, seguire le istruzioni stabilite dal responsabile della sicurezza e fornite dal fabbricante dell'orifizio di fissaggio del guanto
- In caso di contaminazione, attenersi alle istruzioni stabilite dal responsabile della sicurezza
- I guanti devono essere utilizzati a temperatura ambiente. Per un utilizzo in altre condizioni di temperatura, contattare il fabbricante
- I guanti devono essere indossati su mani asciutte e pulite, con le unghie corte. Evitare di indossare gioielli
- Si sconsiglia di utilizzare i guanti qualora esista un rischio di inceppamento in componenti di macchinari in movimento
- Questo guanto può essere montato solo se il cliente dispone di un sistema J2L che consente di fissare il guanto (sistema non convalidato dall'IFTH in occasione dell'esame del tipo CE)

### ➤ Componenti:

- Questo guanto non contiene sostanze a tassi noti o sospetti per avere effetti nocivi sull'igiene o la salute dell'utilizzatore alle condizioni prevedibili di utilizzo

### ➤ Proprietà del guanto

- **Resistenza meccanica EN 388+A1 (2018)**

Test	Livello	Pittogramma
Abrasion	4 su 4	 4122X
Taglio per tranciatura	1 su 5	
Strappo	2 su 4	
Perforazione	2 su 4	
Taglio Test secondo EN ISO 13997:1999	X	
X: prova non realizzata		

- **Destrezza, integrità e fessurazione all'ozono**

Test	Livello
Destrezza <b>EN 420+ A1: 2009</b>	5 su 5
Integrità (pressione 30 mbar) <b>EN 421-2010</b>	Conforme
Resistenza fessurazione all'ozono <b>EN 421-2010</b>	4 su 4

La classe più elevata corrisponde al livello di performance più elevato




## ISTRUZIONI PER L'USO - GUANTO PER SCATOLA A GUANTI (GLOVE BOX) IN POLIURETANO (PUR) 6/10 mm MONTATO SU GHIERA DI SUPPORTO


### ➤ Marchatura

- Esempio di marchatura riportato sul guanto e sull'imballaggio (vedi di seguito)

LOGO PIERCAN

PIERCAN (1)


**0333** (2) **57800 PUR 10 E6 GJABS [XXXXX]**  
 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
**FR XXXXXX LOT: XX XX** (10)  
**EXPIRY: XX/XX/XX** (11)

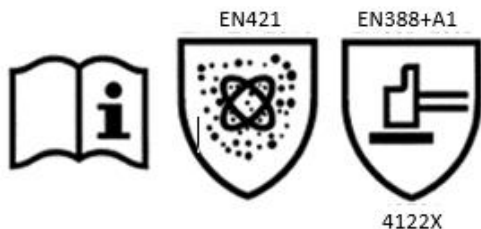

(12)

(13)

(14)

N°	DESCRIZIONE
1	Fabbricante – Responsabile dell'immissione sul mercato
2	Marchatura "CE" e N° dell'organismo incaricato della verifica annuale
3	Forma
4	Lunghezza in mm
5	Materia
6	Taglia
7	Spessore in decimo di mm
8	Guanto montato su ghiera
9	Codice Articolo prodotto
10	Numero di pratica e numero di partita "FR" produzione francese, "US" produzione americana
11	Data di scadenza allo stoccaggio
12	Pittogramma "INFORMAZIONE"
13	Pittogramma "Protezione dalla contaminazione radioattiva" EN 421-2010
14	Pittogramma "Protezione dai rischi meccanici" EN 388+A1 (2018)

### ➤ Taglia disponibile nel principale modello ambidestro

FORMA	Ø O-ring (Diametro orifizio di fissaggio del guanto)	Ø BS (diametro interno della ghiera di supporto)	TAGLIE					
			7.5	8.5	9	9.5	10	10.5
64 (GJABS)	136	131					x	

### ➤ Imballaggio idoneo al trasporto

- I guanti devono essere trasportati nell'imballaggio d'origine.

### ➤ Conservazione

- Riporre in un luogo asciutto, al riparo dalla luce
- Temperatura di conservazione: da 5 a 25°C
- Non riporre nei pressi di impianti elettrici onde evitare l'invecchiamento prematuro del guanto

### ➤ Pulizia/decontaminazione e manutenzione

- Se necessario, i guanti possono essere lavati con acqua saponata, sciacquati con acqua corrente, asciugati in una corrente d'aria a bassa temperatura (< 40°C) e calcati. Le prestazioni non sono garantite dall'IFTH dopo il lavaggio
- Non utilizzare prodotti chimici.
- In caso di necessità di utilizzo di prodotti chimici, contattare il fabbricante per maggiori informazioni
- Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati come spazzole metalliche, carta vetrata o oggetti simili

### ➤ Smaltimento del guanto

- Guanto non riciclabile
- Può essere smaltito come semplice rifiuto non tossico se non è stato contaminato da un prodotto pericoloso
- In caso di contaminazione, smaltire il guanto nella filiera idonea

Certificati di Esame CE e UE del Tipo (Type Examination Certificate) rilasciati da (delivered by): I.F.T.H. (n°0072) Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY Cedex.

Organismo verificatore (Monitoring organization): AFNOR CERTIFICATION (n°0333): 11, rue Francis Pressensé-93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex

**PIERCAN**: Impasse des Macareux ZI Huppain / F-14520 EN BESSIN Tel.: +33 (0)2 31 21 73 80 Fax: 33 (0) 2 31 21 40 23 E-mail: piercan @ piercan.fr Sito Web: www.Piercan.fr

Istruzioni per l'uso: Edizione del 30/03/2022 Rev. 1

## GEBRUIKSAANWIJZING - HANDSCHOEN VOOR HANDSCHOENKAST IN POLYURETHAAN (PUR) 6/10mm GEMONTEERD OP DRAAGRING

### ➤ Toepassingsgebied/ Materiaaleigenschappen en houdbaarheid

- Deze handschoen kan worden gebruikt in de nucleaire sector, de farmaceutische industrie en in diverse andere industrieën
- Deze handschoen is gemaakt van polyurethaan
- Deze handschoen beschermt tegen bepaalde mechanische risico's, tegen radioactieve besmetting.
- Ze kan worden gebruikt in een atmosfeer die ozon bevat. Deze handschoen beschermt niet tegen ioniserende straling
- Er wordt geen enkele bescherming tegen chemische risico's geclaimd
- In de originele verpakking en bewaard onder de hieronder beschreven omstandigheden, is deze handschoen 4 jaar houdbaar

### ➤ Wetgeving, risicoanalyse en aanbevelingen voor gebruik


- Deze handschoen voldoet aan verordening 2016/425.
- Er wordt aan herinnerd dat er volgens (EU) Richtlijn 2019/1832 een analyse moet worden gemaakt van de risico's die verbonden zijn aan het dragen van de handschoen (bijv. lekkage)
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor elk gebruik de kwaliteit en integriteit van de handschoen te controleren. In geval van twijfel wordt aangeraden de handschoenen weg te gooien
- Voor het monteren en het demonteren van de handschoenen op de handschoenkast, de aanwijzingen van de veiligheidsverantwoordelijke en de fabrikant van de handschoenring opvolgen
- Bij besmetting de aanwijzingen van de veiligheidsverantwoordelijke opvolgen
- De handschoenen moeten bij kamertemperatuur worden gebruikt. Neem voor gebruik bij andere temperaturen contact op met de fabrikant
- De handschoenen moeten worden gedragen aan droge, schone handen met korte vingernagels. Sierraden moeten worden vermeden
- Handschoenen mogen niet worden gedragen op plaatsen waar het risico bestaat dat ze door bewegende machineonderdelen worden gegrepen
- Deze handschoen mag enkel gemonteerd worden als de klant beschikt over een systeem J2L dat daarvoor geschikt is (Systeem niet gevalideerd door het IFTH tijdens het EG-typeonderzoek)

### ➤ Componenten:

- Deze handschoen bevat geen stoffen in gehalten waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze, onder de te verwachten gebruiksomstandigheden, schadelijke gevolgen hebben voor de hygiëne of de gezondheid van de gebruiker

### ➤ Eigenschappen van de handschoen

- *Mechanische weerstand EN 388+A1 (2018)*

Tests	Niveau	Pictogram
Schuring	4 op 4	 4122X
Snijden door hakken	1 op 5	
Scheuren	2 op 4	
Doorboring	2 op 4	
Snijtests volgens EN ISO 13997:1999	X	
X: test niet uitgevoerd		

- Behendigheid, integriteit en scheurvorming door ozon

Tests	Niveau
<i>Behendigheid EN 420+ A1: 2009</i>	5 op 5
<i>Integriteit (druk 30 mbar) EN 421-2010</i>	Conform
<i>Bestendigheid tegen scheurvorming door ozon EN 421-2010</i>	4 op 4

De hoogste klasse stemt overeen met het hoogste prestatieniveau




## GEBRUIKSAANWIJZING - HANDSCHOEN VOOR HANDSCHOENKAST IN POLYURETHAAN (PUR) 6/10mm GEMONTEERD OP DRAAGRING


### ➤ Markering

- Voorbeeld van markering op de handschoen en de verpakking (zie hieronder)

LOGO PIERCAN

PIERCAN (1)


**0333** (2) **57800 PUR 10 E6 GJABS [XXXXX]**  
 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
**FR XXXXXX LOT: XX XX** (10)  
**EXPIRY: XX/XX/XX** (11)

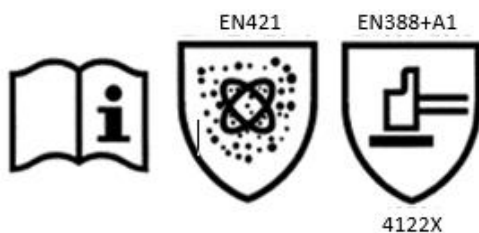

(12)

(13)

(14)

Nr.	BESCHRIJVING
1	Fabrikant – Verantwoordelijk voor het op de markt brengen
2	CE-markering en nummer van de instantie die met de jaarlijkse controle is belast
3	Vorm
4	Lengte in mm
5	Materiaal
6	Maat
7	Dikte in 10den van een mm
8	Handschoen gemonteerd op ring
9	Artikelcode product
10	Dossiernummer en partijnummer "FR" Frans fabricaat "US" Amerikaans fabricaat
11	Vervaldatum bij opslag
12	Pictogram "INFORMATIE"
13	Pictogram "Bescherming tegen radioactieve besmetting" EN 421-2010
14	Pictogram "Bescherming tegen mechanische risico's" EN 388+A1 (2018)

### ➤ Beschikbare maat in het belangrijkste tweehandige model

VORM	Ø RDG (diameter van de handschoenring)	Ø BS (binnendiameter van de draagrings)	MAAT					
			7.5	8.5	9	9.5	10	10.5
64 (GJABS)	136	131					x	

### ➤ Verpakking geschikt voor vervoer

- De handschoenen moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden vervoerd.

### ➤ Opslag

- Bewaren op een droge plaats, afgeschermd van het licht
- Opslagtemperatuur: 5 tot 25 °C.
- Geen opslag in de buurt van elektrische installaties om versnelde veroudering te voorkomen

### ➤ Reiniging/ontsmetting en onderhoud

- Indien nodig worden de handschoenen gewassen met zeepwater, afgespoeld met schoon water, gedroogd in een luchtstroom bij lage temperatuur (<40°C) en met talkpoeder bestrooid. De prestaties worden na het wassen niet gegarandeerd door het IFTH
- Gebruik geen chemicaliën.
- Als het gebruik van chemicaliën vereist is, neem dan contact op met de fabrikant voor meer inlichtingen
- Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals staalborstels, schuurpapier of soortgelijke voorwerpen

### ➤ Behandeling van de handschoen

- Niet-recycleerbare handschoenen
- Ze mag worden weggegooid als gewoon niet-giftig afval indien ze niet verontreinigd is door een gevaarlijk product
- Als een handschoen vuil is, gooi ze dan weg via het geschikte afvalverwerkingskanaal

Certificaten van EG- en EU-typeonderzoek (AET) uitgereikt door (delivered by): I.F.T.H. (nr. °0072) Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY Cedex.  
 Verifiërende instantie (Monitoring organization): AFNOR-CERTIFICERING (nr. °0333): 11, rue Francis Pressensé-93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex

PIERCAN: Impasse des Macareux ZI Huppain / F-14520 PORT EN BESSIN Tel.: 33 (0)2 31 21 73 80 Fax: 33 (0) 2 31 21 40 23 E-mail: piercan @ piercan.fr Website: www. Piercan.fr

Gebruiksaanwijzing: Uitgave van 30/03/2022 Rev 1